

Administración por bomba

La administración con bomba permite **programar la velocidad de infusión con exactitud.**



- **Aspire de 20-40 ml de agua** (o la cantidad indicada por su profesional de la salud) y enjuague bien el tubo de nutrición.




- **Cuelgue el envase** con la fórmula nutricional y **conéctelo al sistema de administración.** Si su envase es una botella, quizá le resulte más cómodo conectarla al sistema de administración antes de colgarla. El envase debe colgarse al menos **20 cm. por encima de la cabeza del paciente para que la fórmula fluya mejor.**

- **Conecte el sistema** de administración a la bomba siguiendo las instrucciones específicas para el modelo de bomba que le han proporcionado.



- **Programe la bomba** con la pauta de velocidad indicada por el profesional sanitario. Hágalo según le indiquen o como se muestre en el correspondiente manual de instrucciones de la bomba.

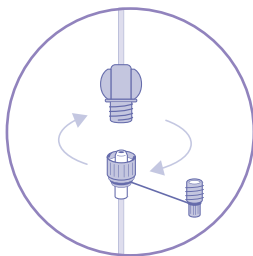

- **Cuando esté preparado** para administrar la nutrición, asegúrese de que el sistema de nutrición esté conectado a la sonda. Inicie la administración.

- **Cuando termine** la nutrición, descuelgue el envase y desconéctelo del sistema de administración.
- **Desconecte el sistema** de administración de la sonda.



- Para terminar, **lave la sonda** pasando 20-30 ml de agua con una jeringa (en caso de nutrición continua, cada 6 horas).



- **Alarmas:** Puede que la bomba emita una alarma. No debe preocuparse. En la mayoría de los casos, estos problemas pueden resolverse consultando las instrucciones de uso de la bomba. Si no lo consigue, consulte con su médico o enfermera.